

MINI CROSSER

- Originál



medema group



MINI CROSSER - Originál

Mini Crosser se vyrábí ve Skandinávii, specificky pro Nordické podmínky. Je to nejlépe se prodávající elektrický skútr v Severní Evropě. Můžeme dodat rozsáhlou řadu skútrů a příslušenství.

Funkce, které odlišují Mini Crosser od jiných, jsou **funkčnost, síla, pohodlí, odolnost, bezpečí a celková ekonomičnost**. S adaptabilitou Mini Crosserů a širokou řadou příslušenství je vhodný pro jakýkoli typ uživatelů - dospělé, stejně jako děti.

Podle našich zkušeností, adaptabilita a flexibilita jsou důležitými faktory pro mnoho našich uživatelů, obzvláště pro ty, kteří trpí artritidou, svalovou atrofii, MS, bolestmi zad a dalšími.

Časem se potřeby lidí mění, například je potřebné jiné ovládání rychlosti, větší sedadlo, extra opora, elektrické doplňky a další příslušenství. Se skútreem Mini Crosser máte bezpečnou a jistou budoucnost.

- ✓ Dodáváme a vyrábíme kvalitní pomůcky a služby v oblasti zdravotnictví, pro postižené a seniory.
- ✓ Přizpůsobujeme naše služby potřebám svých zákazníků.
- ✓ Máme vlastní vývoj a výrobu, což dává uživatelům možnost zapojit se do společnosti.
- ✓ Soustředujeme se na atraktivní dizajn a funkčnost zakořeněnou ve Skandinávském prostředí.

Máte možnost shlédnout některé z našich Mini Crosserů na youtube. Pokud máte na Vašem telefonu čtečku QR kódů, můžete je zhlédnout. Pro instalaci QR čtečky vyhledejte na internetu QR čtečku nebo použijte iTunes či Google store. Pokud nemáte tu možnost a chcete vidět tyto videa, dejte si na YouTube vyhledat "medemagroup".



Mini Crosser



Mini Crosser M1 Model

3-kolový
Str. 22



Mini Crosser M1 Model

4-kolový
Str. 23



Mini Crosser M2 Model

3-kolový
Str. 24



Mini Crosser M2 Model

4-kolový
Str. 25



Mini Crosser HD

Uživatelská váha
250 kg
Str. 26



Mini Crosser M2 Maxx
2-motorový pohon
Str. 27



Mini Crosser M-Joy
Řízení joystickem
Str. 28



Mini Crosser také pro děti
Str. 29



Cabin
4-kolový
Str. 30



1980



1984



1986



1987



1989



1991



1997



2003



2009

»Nezáleží, jestli jste se vylíhli vedle kachního jezírka, pokud se vylíhnete jako labuť...«

Od 1980 Mini Crosser vyrábí elektrické skútry a invalidní vozíky pro starší lidi a postižené. Víze Mini Crosser je nabídnout řešení pro lidi s poruchami chůze, a dát jim možnost udržet si aktivní, společenský život jak jen to jde bez pomoci ostatních.

Obzvlášť Mini Crosser je znám svým chytrým dizajnem, manévrovatelností a silnými motory. Právě silné motory udělali skútry Mini Crosser extrémně populárními v krajinách se strmými svahy a kopci. Ani led a sníh nemohou zastavit tyto vozidla do každého terénu, protože Mini Crosser je také dostupný s pneumatikami s hroty. Během let Mini Crosser získal mnoho vědomostí a znalostí, aby uživatelům zajistil maximální spokojenost a výkon jejich skútrů a vozíků.

Když standardní řešení – která nabízí naše široká řada příslušenství – nestačí, je možné provést speciální úpravy po konzultaci s centrem technické pomoci, institucemi a organizací pro postižené. Aktuální řada skútrů Mini Crosser zahrnuje zhruba 20 modelů a široký výběr příslušenství – včetně dalších pomůcek pro zlepšení života postižených.

The Mini Crosser-volba

Filozofie, která stojí za Mini Crosser Vám nabízí individuální volby...

Důvod

Nevěříme, že »jedna velikost sedne všem«. Mini Crosser musí být Silný, Stabilní a Bezpečný. Nicméně našim cílem je, aby byl snadno použitelný pro všechny lidi.

To znamená

Všechny Mini Crossery jsou vytvářené individuálně pro koncového uživatele. Chceme, aby byli zákazníci spokojeni.

Závěry

Během let Mini Crosser získal všechny vědomosti a zkušenosti, aby zajistil uživatelům maximální spokojenost a užitek z jejich Mini Crosseru. Když standardní řešení – doplněná naší širokou nabídkou příslušenství – nestačí, je možné provést speciální úpravy po konzultaci s centry pro technickou pomoc, institucemi a dalšími.

3- nebo 4-
kolový
Str.6



Černý

Modrý

Šedý

Sedadlový systém

- ERGO2 – Str. 8
- EBLO – Str. 17
- HD – Str. 18
- Dětský – Str. 18

Rychlost – Str. 18

- 10 km/h • 13 km/h • 15 km/h

Baterie

- 56 Ah • 80 Ah • 4 Ah

Mini Crosser model

Str. 22-30

- M1 3K
- M1 4K
- M2 3K
- M2 4K
- M1 + M2 4K Cabin
- M1 + M2 4K HD
- M2 4K MAXX
- M-Joy 4K

Příslušenství

Str. 32

- Zrcadlo
- Košík / taška – přední a zadní
- Držák na hůl/berly
- Přívěs
- Volitelné ovládání plynu
- Omezení rychlosti
- Stupačka a nožní podpora
- Kola
- Břišní pás
- Elektrické možnosti
- Atd.

Více informací o Mini Crosser standardech, schválení atd. – Str. 39

Mini Crosser

M-Model 3-kolový



Mini Crosser M-model 3-kolový

Mini Crosser série M je nejsilnější a nejpohodlnější elektrický skútr na trhu. Jeho silný motor a unikátní tlumiče jsou ukryté v nezvykle elegantním dizajnu. Mini Crosser reprezentuje dánskou řemeslnou zručnost a kvalitu v tom nejlepším smyslu slova. Mini Crossery přichází s mnoha vyladěnými drobnostmi a unikátními možnostmi zákaznické úpravy.

Naše velice široká řada sedadel a doplňků splňuje všechny požadavky – například sedadla jsou dostupné v šířkách 34-70 cm. Tato brožura zobrazuje nejpoblíbenější vybavení. Pokud tady něco nenajdete, kontaktujte nás, prosím – určitě najdeme společné řešení. Mini Crosser model M je ve standardní formě stavěn pro lidi do 175 kg. M-model 3-kolový je vhodný pro jízdu uvnitř obchodů, díky šikovnému poloměru otáčení, který je pouhých 134 cm.

3-kolový Mini Crosser je klasifikován jako vozidlo třídy C v souladu s Evropskou klasifikací elektrických skútrů.

Je v souladu s vyhláškou o lékařských zařízeních 93/42/ECC. Mini Crosser se vyrábí v souladu s harmonizovanou normou EN 12184 – Elektrický poháněné invalidní vozíky, Mini Crossery a jejich nabíječky.

Výrobek prošel analýzou rizik v souladu s harmonizovanou normou DS/EN ISO 14971:2007-04-10 2. Edice – Zdravotnické prostředky – Aplikace řízení rizika na zdravotnické potřeby.

- Přenosná výška bez sedadla - 69 cm
 - Délka - 134 cm
 - Se stabilizačními kolečky - 142 cm
 - Šířka, bez sedadla a dalšího příslušenství - 68 cm
 - Otočení dokola / poloměr 268 cm / 134 cm
 - Váha bez sedadla a baterií 115 kg
 - Rychlost – 10-13 a 15 km/h
 - (Maximální rychlost závisí na zákonech ve vaší krajině)
 - Sedadla od 34 po 70 cm
- (Další technické údaje najdete v uživatelském manuálu)

M-Model 3-kolový

- Pružiny – unikátní, nastavitelné zadní tlumiče.
- Kola – možnost výběru pneumatik proti proražení.
- Dojezd – různé kryty baterií a nastavení baterií, dojezd až 70 km s bateriemi 94 Áh.
- Sedadlová tyč – výšku sedadla je možné nastavit bez nářadí.
- Zadní světla a směrovky (světlo vyzařující LED diody)



Mini Crosser

M-model, 4-kolový



Mini Crosser M-model 4-kolový

Mini Crosser série M je nejsilnější a nejpohodlnější elektrický skútr na trhu. Jeho silný motor a unikátní tlumiče jsou ukryté v nezvykle elegantním dizajnu. Mini Crosser reprezentuje dánskou řemeslnou zručnost a kvalitu v tom nejlepší smyslu slova. Mini Crossery přichází s mnoha vyladěnými drobnostmi a unikátními možnostmi zákaznické úpravy.

Naše velice široká řada sedadel a doplňků splňuje všechny požadavky – například sedadla jsou dostupná v šířkách 34-70 cm. Tato brožura zobrazuje nejpobulárnější vybavení. Pokud tady něco nenajdete, kontaktujte nás, prosím – určitě najdeme společné řešení. Mini Crosser model M je ve standardní formě stavěn pro lidi do 175 kg. HD verze modelu M má nosnost až 250 kg, ale pouze při rychlosti 10 km/h

Mini Crosser 4-kolový je klasifikován jako vozidlo třídy C v souladu s Evropskou klasifikací elektrických skútrů.

Je v souladu s vyhláškou o lékařských zařízeních 93/42/ECC. Mini Crosser se vyrábí v souladu s harmonizovanou normou EN 12184 – Elektricky poháněné invalidní vozíky, Mini Crossery a jejich nabíječky.

Výrobek prošel analýzou rizik v souladu s harmonizovanou normou DS/EN ISO 14971:2007-04-10 2. Edice – Zdravotnické prostředky – Aplikace řízení rizika na zdravotnické potřeby.

- Přenosná výška bez sedadla - 69 cm
 - Délka - 140 cm
 - Se stabilizačními kolečky - 148 cm
 - Šířka, bez sedadla a dalšího příslušenství - 68 cm
 - Otočení / poloměr 345 cm / 172,5 cm
 - Váha bez sedadla a baterií 124 kg
 - Rychlost - 10 -13 a 15 km/h
 - (Maximální rychlost dle zákonů platných ve vaší krajině)
 - Sedadla od 34 do 70 cm
- (Další technické údaje najdete v uživatelském manuálu)

M-Model 4-kolový

- Pružiny – unikátní, nastavitelné zadní tlumiče.
- Kola – možnost výběru pneumatik proti proražení.
- Dojezd – různé kryty baterií a nastavení baterií, dojezd až 70 km s bateriemi 94 Ah.
- Sedadlová tyč – výšku lze nastavit bez nářadí.
- Zadní světla a směrovky (světlo vyzářující diody - LED)



Když si sedáme, vyžaduje to víc, než si myslíme


Při mnoha aktivitách jako například čtení, mluvení, psaní a sledování televize, obvykle sedíme. Všeobecné přesvědčení je, že naše tělo, tedy naše svaly nemusí moc pracovat, tudíž relaxujeme.

To však platí, pouze když sedíme ve správné pozici. Pokud je držení našeho těla nesprávné, naše svaly pracují ještě více! V takových případech je zátěž na naši páteř, ramena atd. obvykle dva až třikrát větší, než když vstaneme.

Dobry dizajn sedadla pomáhá předcházet únavě a jiným problémům. Výsledkem je sedadlo, které zajistí, že tělo je v nejpřirozenější poloze, což zabrání nepřírodnímu hrbení se.

ERGO2 se soustřeďuje ve všech ohledech na individuálního uživatele. Tudíž každé sedadlo lze nastavit tak, aby se přizpůsobilo tělu uživatele, se zaměřením na správnou výšku sedadla, správnou hloubku sedadla, správnou výšku ručních opěrek a správnou bederní podporu.

Pro lidi s problémy kolen a kyčle je možné nezávisle nastavit výšku sedadla a podporu pro lýtka, ať už na sedadle nebo pomocí příslušenstva sedadla.

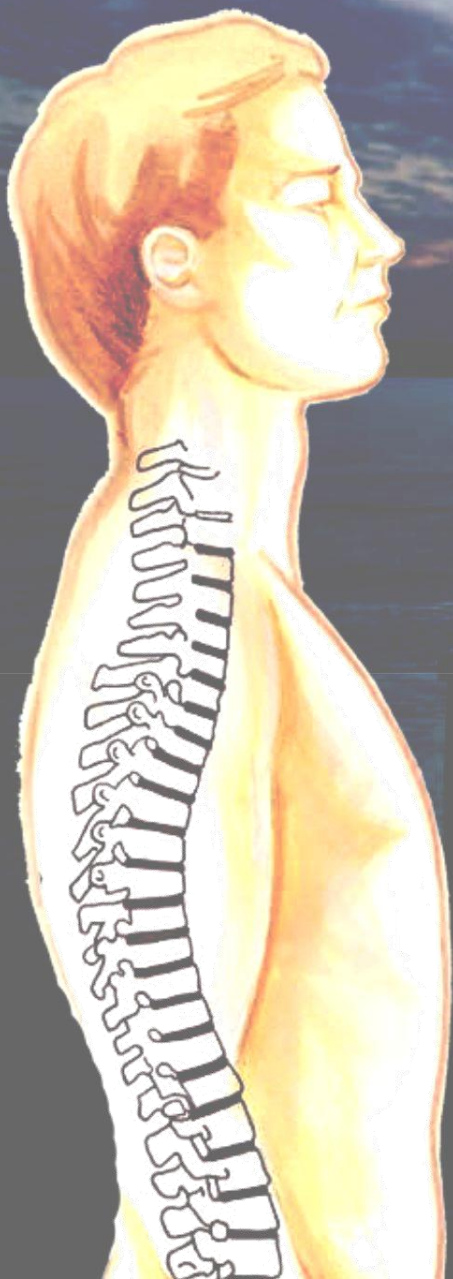

Poloha v sedu/řízení

Sezení s rovnými zády je nejnáročnější pro (přirozenou) polohu páteře. Protože sedadlo se přizpůsobí uživateli, pokud je pánev ve správné poloze, páteř obdrží plnou podporu a uleví se nohám, tudíž se dosáhne relaxované polohy v sedu.


Poloha vstávání

Zvednutí se ze sedadla může vyžadovat hodně síly. Proto jsou ruční opěrky ERGO2 zpevněné, aby vydrželi zátěž, kterou na ně vyvinete během vstávání ze sedadla. Možnost posunutí ERGO2 sedadla dopředu a využití otáčení (Vpravo nebo vlevo) poskytne snadnější způsob, jak se dostat do nebo ven ze sedadla.

Sedadlový systém ERGO2 splňuje:

Statickou, nárazovou a únavovou pevnost v souladu s ISO 7176-8: 2002 – Norma, která zní – Sedadlo musí splňovat váhovou kapacitu skútru. ERGO2 jsou testované podle této normy, tj. pokud je Mini Crosser stavěn pro váhu uživatele 175 kg, pak musí sedadlo a ruční opěrky zvládnout tuto váhu – každá ruční opěrka musí být schopna udržet 95kg tlak v 15 stupňovém úhlu, 5 cm od konce opěrky, bez toho, aby se zlomila.

Požárně testováno podle vyhlášek EN 1021-1 a EN 1021-2.
DIN EN 1122 Bio kompatibilita – Testování sedadel a ručních opěrek.

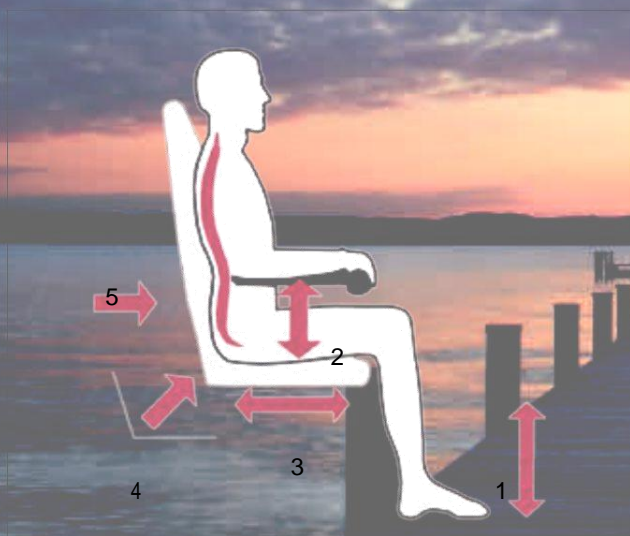

Seřízení:

1. Upravte výšku sedadla, buď nastavením sedadlové tyče, nebo zvednutím stupačky.
2. Upravte výšku ručních opěrek
3. Upravte hloubku sedadla
4. Upravte sklon sedadla
5. Upravte bederní oporu

Sedadlový systém ERGO2 disponuje následujícími elektrickými nastaveními

- Výška sedadla
- Sedadlo dopředu / dozadu
- Otáčení sedadla
- Úhel pro zadní opěradlo sedadla

Proto sedadlo není jenom sedadlo...



Ergo2 Sedadlo, 40 cm šířka. M-127-07-152N
154N

Ergo2 Sedadlo, 45 cm šířka. M-127-07-153N

Ergo2 Sedadlo, 50 cm šířka. M-127-07-

ERGO2 sedadlo nabízí větší svobodu – lepší kvalitu života

Standard pro všechny sedadlové systémy ERGO2



Sklon sedadla

Opěrku na záda lze nastavit ve sklonu 45° dozadu a 90° dopředu. To se dělá zatažením za páčku na pravé straně sedadla.



Po sklopení zádové opěrky dolů, sejmutí opěrky hlavy a sklopení sloupku řízení bude mít Mini Crosser výšku pouhých 75 cm.



Případně můžete otočit sedadlo; pak ho posuňte dopředu, sejmete opěrku hlavy a sklopte sloupek řízení a výška skútru bude pouhých 72 cm.

V závislosti na systému sedadlové tyče a velikosti pneumatik



Hloubka sedadla

Zádovou opěrku lze nastavit do hloubky 320 mm až 550 mm. Nastavení hloubky sedadla je důležité, pro správnou oporu lýtek a zad.





Páčka pro otáčení sedadla

Pro otočení sedadla zatáhněte za páčku dozadu nebo vpřed, podle toho, na které straně je namontovaná. Sedadlo lze otočit na kteroukoli stranu, se zastavením každých 45°.

Pružina páčky sedadlo automaticky uzamkne v dané poloze, když se páčka uvolní.

Tato páčka je standardně umístěna vpravo, ale může se umístit také na levou stranu.

Pokud je páčka vlevo, musíte na ni zatlačit dopředu, abyste mohli otočit sedadlem, místo zatažení. Lze také upravit délku páčky, pro snadnější manipulaci a také ji lze snadno přesunout na druhou stranu.



Páčka pro posun sedadla vpřed / vzad

Sedadlový systém ERGO2 používá dvě posuvné kolejničky s kladkou, což ulehčuje nastavení.

Sedadlo se posune dopředu nebo dozadu podle potřeby, až na vzdálenost 200 mm.

Uvolněním páčky se sedadlo automaticky uzamkne v nejbližší poloze.

Systém sedadlové tyče pro ERGO2 také poskytuje pevnou a bezpečnou polohu pro sezení.



Nastavení výšky ručních opěrek

Výšku ručních opěrek lze nastavit jednotlivě. Až o 140 mm od nejnižšího bodu po nejvyšší polohu.


To pomůže zajistit správné zarovnání. Ruční opěrky lze nastavit samostatně, takže nastavením výšky poskytnou pohodlnou oporu.






Mini Crosser

ERGO 2 sedadlo

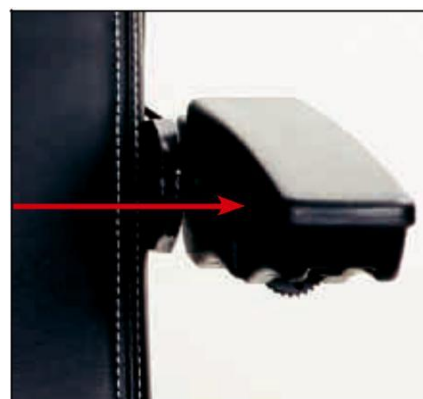

Nastavení šířky ruční opěrky

Každou ruční opěrku lze samostatně posouvat o 25 mm na každou stranu.

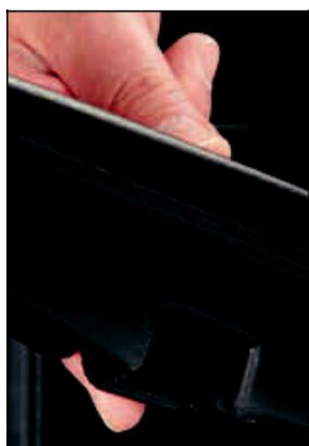

Nastavení úhlu ruční opěrky



Nastavení výšky opěrky hlavy / Nastavení opěrky hlavy dopředu nebo dozadu

Opěrku hlavy lze nastavit ve směru nahoru nebo dolů a dozadu nebo dopředu. Podpora krku, pro ERGO2 Sedadlo - M-127-7-200

V kombinaci s možnostmi nastavení pro sedadlový systém ERGO2 spolu s možnostmi nastavení u M-Modelů Mini Crosser jsme se snažili poskytnout nejlepší pohodlí při sezení pro každého uživatele.

Ve zkratce, nabízíme možnost

- Nastavení sklonu řídítek
- Nastavení výšky řídítek
- Výška sedadla
- Sklon sedadla
- Hloubka sedadla
- Výška ručních opěrek
- Sklon ručních opěrek
- Šířka ručních opěrek
- Nastavení opěrky hlavy



ERGO2 sedadla příslušenství

Jako doplněk k unikátní nastavitelnosti, sedadlo ERGO2 poskytuje také velký výběr příslušenství, které lze upevnit na sedadlo a které vám ulehčí život.

Příslušenství



Zadní košík, univerzální - od 34 cm do 70 cm. M-127-06-165



Držák na hole / berle pro jeden pár berlí, namontovaný na sedadlo Ergo2 M-127-06-003



Bezpečnostní břišní pás pro sedadlový systém Ergo2. 65 až 125 cm M-127-06-144

Bezpečnostní pás, automatické samonavíjení pásu pro sedadlo Ergo2 M-127-07-161



Výstražný trojúhelník s opěrkou pro sedadlo Ergo2 M-127-06-973



Držák na láhev připevněný na sedadlo Ergo2 CR-00636



X-Grip Držák na mobilní telefon - Mini Crosser CR-03127



Batůžek na ruční opěrku – komplet Ergo2 M-127-07-284

System ručních opěrek pro sedadlo ERGO2

Sedadlový systém ERGO2 je standardně vybaven těmito ručními opěrkami.



Případně může být sedadlo ERGO2 vybaveno těmito ručními opěrkami:

Ruční opěrka, Dospělý, Ergo2, Nastavitelná, bez polstrování, Levá. M-127-07-169

Ruční opěrka, Dospělý, Ergo2, Nastavitelná, bez polstrování, Pravá. M-127-07-170

Ruční opěrka sedadlo Ergo. SR-01633

Polstrování ruční opěrky, Kůže - 70x300 mm, Pravá. CR-00190

Polstrování ruční opěrky, Kůže - 70x300 mm, Levá. CR-00317

Polstrování ruční opěrky, Kůže - 100x350 mm, Pravá. CR-00777

Polstrování ruční opěrky, Kůže - 100x350 mm, Levá. CR-00778

Polstrování ruční opěrky, Kůže - 70x400 mm, Pravá. CR-00783

Polstrování ruční opěrky, Kůže - 70x400 mm, Levá. CR-00784

Polstrování ruční opěrky, Kůže - 70x350 mm, Pravá. CR-00787

Polstrování ruční opěrky, Kůže - 70x350 mm, Levá. CR-00788



Pro děti a juniory jsme vyvinuli ruční opěrky, které lze nainstalovat na sedadlový systém ERGO2:

Držák ruční opěrky, dětský ERGO2, Levý. M-127-07-171

Držák ruční opěrky, dětský ERGO2, Pravý. M-127-07-172

Podložka ruční opěrky, MC Ergo standard dětská. SR-01635

Držák ruční opěrky, dětský ERGO2, Levý. M-127-07-171

Držák ruční opěrky, dětský ERGO2, Pravý. M-127-07-172

Podložka ruční opěrky, dětská; kůže. - 70x210mm Levá. CR-00775

Podložka ruční opěrky, dětská; kůže. - 70x210mm Pravá. CR-00776

Podložka ruční opěrky, dětská; kůže. - 70x260mm Levá. CR-01341

Podložka ruční opěrky, dětská; kůže. - 70x260mm Pravá. CR-01342



Opora nohou



Amputační opora, vpravo nebo vlevo pro M-127-07-162



ERGO2 Opora stehna 100*300, vlevo nebo vpravo, nastavitelná pro ERGO2 CR-03074

Elektrické nastavení sedadla pro ERGO2



Elektrický sedadlový sloup, kompletní, 15 cm zdvih sedadla pro sedadlový systém ERGO2. M-127-02-051



Elektrický posun vpřed / vzad



Sedadlo lze posunout až o 15 cm. Váha uživatele až do 175 kg. M-127-07-159



Elektrická zádová opěrka



Elektricky nastavitelná zádová opěrka pro sedadlo ERGO2 M-127-07-158

Elektrické otáčení



Elektrické otáčení sedadla, až o 90° vlevo nebo vpravo M-127-07-160

EBLO sedadlo

Základní sedadlo.

S možností nastavení úhlu pro zádovou opěrku, nastavení výšky ručních opěrek. Opěrka hlavy a posuvné kolejničky.

EBLO sedadlo, šířka sedadla 46 cm, hloubka sedadla 45 cm. M-127-07-022



Zadní košík, univerzální - od 34 cm do 70 cm
M-127-06-164



Břišní bezpečnostní pás pro sedadlo Eblo & Ergo 65 až 125 cm
T-127-06-144

ERGO HD sedadlo

Sedadlo ERGO HD bylo dodatečně zpevněné u sedadla a ruční opěrky pro uživatele s vyšší váhou až do 250 kg.
60 cm šířka sedadla
M-127-07-101
65 cm šířka sedadla
M-127-07-102
70 cm šířka sedadla
M-127-07-103
Polstrovaní ruční opěrky, kůže
- 70x350 mm,
Vpravo CR-00787
Polstrovaní ruční opěrky, kůže
- 70x350 mm, Vlevo
CR-00788



Ergo dětské a junior sedadla

Naše Ergo sedadlo je přizpůsobené dětem a mladým lidem.
Dětské sedadlo: šířka 35 cm, hloubka 20 - 30 cm.
M-127-07-008
Junior sedadlo: šířka 37 cm, hloubka 25 - 40 cm.
M-127-07-007
Případně je možnost použít sedadlo pro dospělé.



Možnost převodovky

Mini Crosser nabízí 3 různé nastavení rychlosti. Nicméně, v určitých krajinách jsou zákony omezující rychlost u výrobků pro mobilitu. Zeptejte se vašeho místního prodejce nebo místních úřadů na dopravní předpisy. U skútrů Mini Crosser MaxX, Mini Crosser HD a Mini Crosser Joy, je rychlostní limit nastaven na 10 km/h

Nabízíme

- 10 km/h verze – tahle verze je vhodná pro kopcovitý terén a jízdu v terénu
- 13 km/h (8 mp/h) verze – vhodná pro jízdu v terénu
- 15 km/h verze – běžně využívaná na rovných cestách a trávě

Pro zajištění vašeho bezpečí může být Mini Crosser - jak 3, tak 4-kolový vybaven redukcí rychlosti při zatáčení.

Čidlo, poloviční rychlost 3K, M-model
M-127-06-170

Čidlo, poloviční rychlost 4K, M-model
M-127-06-208

Rodičovský klíč



Pro zajištění bezpečnosti dětí a mladých lidí nabízíme různá řešení.

Rodičovská rychlost s potenciometrem - M-127-06-135

Omezení rychlosti, spínač - T-127-06-121

Upozorňujeme, že všechny modely Mini Crosser M2 mají tento standard.



Barvy pro Mini Crosser...



Mini Crosser je ve 3 standardních barvách. Můžete si vybrat z kovové šedé, kovové modré a kovové černé. Cabin však nabízíme pouze v kovové šedé.



Mini Crosser

M1, 3-kolový



Tento Mini Crosser je vybaven sedadlem Ergo2 a standardními pneumatikami.

Nejlépe na třech kolech

Dánská řemeslná práce. Nejvyšší kvalita v oboru.

Velice pohodlné tlumiče.

Obzvláště silný a spolehlivý skútr. Dlouhá výdrž. Široká řada příslušenství.

Prošel cash testem. Dodávka náhradních dílů garantována minimálně po dobu 10 let.

Vhodný pro jakékoli klima. Přátelský k životnímu prostředí.

Možnost nátěru dle

přání zákazníka.

Doporučené TÜV.


ABE typ schválený

pro Německo.



Šlápněte na to

Všechny M-modely Mini Crosser jsou vybavené páčkou akcelérátoru, takže můžete zrychlit pomocí pohybu palce nebo prsty. Páčka akcelérátoru může být na obou stranách, případně je možné nainstalovat otočnou rukojeť akcelérátoru nebo nožní pedál, podle vašich potřeb.

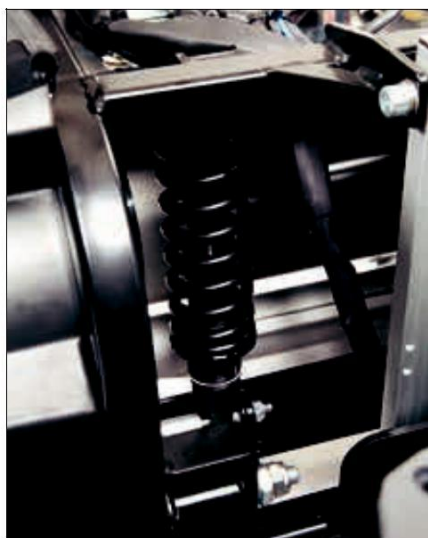

Tlumiče

Tlumiče Mini Crosseru pohlcují nárazy v nerovném terénu a zajišťují dobrou a pohodlnou jízdu. Tvar a vinutí pružin a kvalita oceli zajišťuje dlouhou životnost pružin.



Příslušenství

Pro standardní verzi je dostupná široká řada příslušenství. Na obrázku je zpětné zrcátko a měřič rychlosti.

Mini Crosser

M1, 4-kolový


Nejvyšší kvalita na 4 kolech

Dánská řemeslná práce. Nejvyšší kvalita v oboru.
Úžasně pohodlné tlumiče.
Extremně silný a spolehlivý skútr.
Dlouhá životnost.
Široká řada příslušenství.
Úspěšně prošel cash testem.
Dodávka náhradních dílů garantována min. po dobu 10 let.
Vhodný do jakéhokoli klimatu.
Přátelský k životnímu prostředí.
Speciální nátěr na požádání
Schváleno TÜV. ABE typ schválen pro Německo.

Rybaření na jezeře:



Tento Mini Crosser je vybaven sedadlem Ergo a standardními pneumatikami.

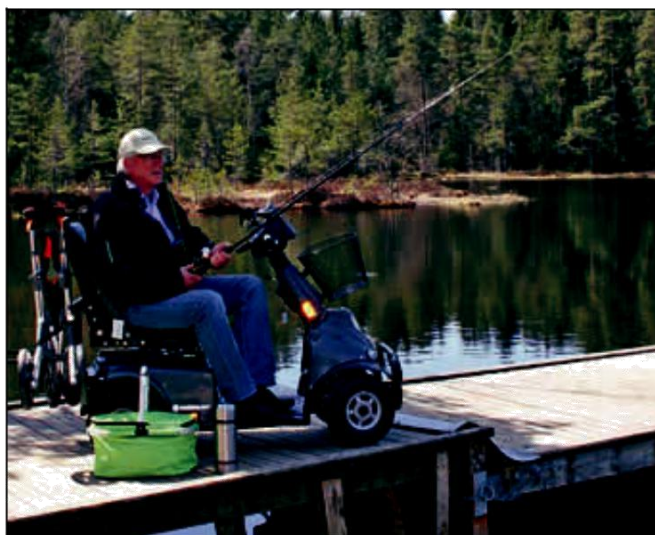

Mini Crosser je vhodný pro jízdu jak v městském tak venkovním prostředí.




S Mini Crosserem získáte nezávislost, takže si můžete užívat výhod spolu s přáteli a rodinou.

Mini Crosser

M2, 3-kolový



Tohle je Mini Crosser M2 3-kolový, se speciálním bílým nátěrem s vikinskými symboly; sedadlo je typ EBLO. Pneumatiky jsou golfové.

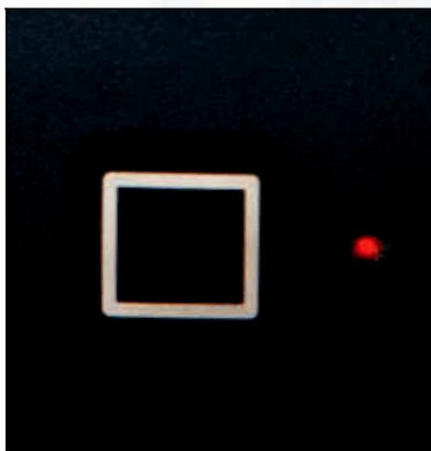


Ochrana proti krádeži

Máte také možnost instalace snadného systému ochrany proti krádeži.



Obrazovka

Velká obrazovka poskytuje snadný přehled, například pokud aktivujete směrovku. Z obrazovky se můžete dozvědět informace jako – kolik kilometrů jste již ujeli, stav nabití baterie a mnohem více - stačí zmáčknout tlačítko.

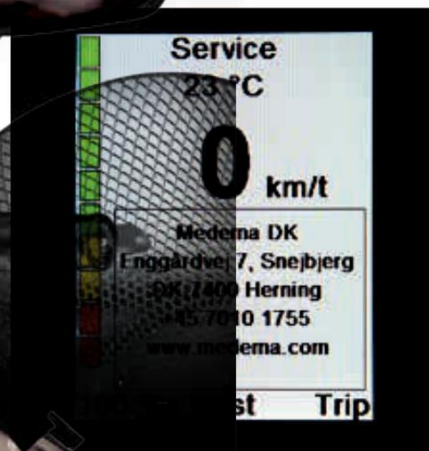

Servisní informace

Zmáčknutím tlačítka získáte mnoho dalších informací o stavu skútru a můžete si vyžádat servisní informace, abyste byli vždy v obraze.

Mini Crosser

M2, 4-kolový


Mini Crosser M2 byl inspirován již klasickým modelem M1. I když M2 nabízí stejné funkce a vybavení jako M1, informační systém u M2 nabízí širokou řadu nových, inovativních možností. Jasný barevný displej nabízí jednoduchý a intuitivní přístup k informacím.

M2 se od svého předchůdce liší silnější elektronikou a především novým informačním systémem s jasným, barevným displejem. Barevný displej se lehce čte i při přímém slunci, protože je ovládán světelným čidlem. Hlavní obrazovka je velice přehledná a uvádí mnoho důležitých informací pro uživatele, jako je datum, čas, teplota, ujetá vzdálenost, aktuální rychlost a stav baterie.




Světelný asistent

U Mini Crosseru M2 můžete mít k dispozici také světelného asistenta, s čidlem pro denní / noční osvětlení, pokud chcete. Čidlo zajistí, že se světla při soumraku nebo při vjezdu do garáže samy zapnou. Obrazovka se také přizpůsobí měnícím se světelným podmínkám.

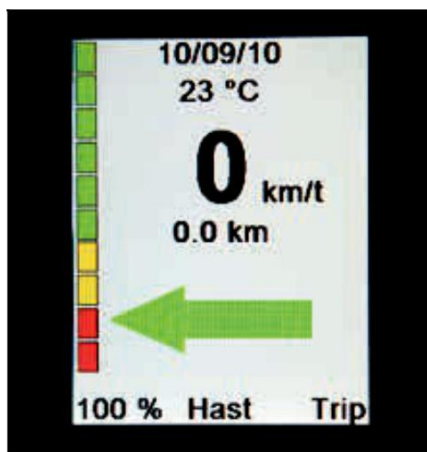

Ukazatele

Máte možnost navrhnout dizajn svého vlastního Mini Crosseru. Můžete například aktivovat zvukový signál při couvání nebo při zapnutí směrovek. Směrovky lze vypnout manuálně, nebo to za vás udělá systém automaticky, záleží jen na vaší volbě.

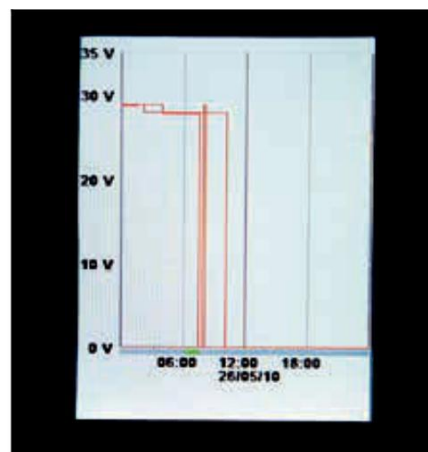

Údaje se ukládají

Údaje z vašeho Mini Crosseru se ukládají, takže v případě poruchy je mnohem snadnější a rychlejší zjistit příčinu problému.



Mini Crosser

HD

Extrémní síla pro náročné podmínky
Váha uživatele až do 250 kg. Pro maximální bezpečí a dostupnost pro těžší uživatele. Rám a sedadlová tyč jsou zesílené. Super zesílené sedadla až do šířky 70 cm.



Robustní kvalita

Mini Crosser HD je speciálně vyráběn, testován a schválen pro lidi s váhou do 250 kg.



Kvalita – nade vše...!

Mini Crosser HD je inspirován populárním modelem M. Navržen pro lidi vážící do 250 kg.



Super-posílené HD sedadla

Sedadlo a ruční opěrky jsou zesílené pro uživatele vážící do 250 kg. Dodávané s šířkou sedadla 60, 65 nebo 70 cm. (Dostupná speciální šířka).

Mini Crosser

M2 Maxx

**Extrémně silný
skútr pro projíždky přírodou**

Se svým 2-motorovým pohonem je skútr MaxX extrémně silný, což z něj dělá očividně první volbu, pokud chcete vyrazit do přírody. Extra velké cross-country kola. Zesílený rám. Šířka sedadla 35-70 cm. (Dostupné speciální šířky sedadel) Vhodný pro děti, mladé lidi a dospělé.



Testování
síly a
zdlávání
kopců:



Extra velká cross-country kola

MaxX má extra silná terénní kola pro maximální dostupnost.



Extrémně silný

Mini Crosser MaxX je vybaven 2-motorovým pohonem, pro extrémní sílu, výkon a bezpečí.



Bezpečnostní funkce

MaxX může být také vybaven u junior modelů příslušenstvím jako je stabilizátor, bezpečnostní pásy, speciální barvy, atd. Obzvláště vhodné pro náročnou jízdu mladých lidí.

Mini Crosser

M-joy s joystickem


Ted' můžou všichni jezdit na Mini Crosser

Mini Crosser model M-joy s ovládáním joystickem byl vyvinut pro uživatele s omezenou silou v rukou a pažích. M-Joy je vhodný pro děti, mladé lidi a dospělé. Je vybaven velkými koly a skvělými tlumiči.

S M-joy máte také na výběr z mnoha sedadel a příslušenství, které je standardní pro všechny Mini Crossery modelu M. Lze jej také vybavit kabinou. Vysoká stabilita díky vlastní váze.



Se skútreM Mini Crosser M-joy si môžete vychutnat jízdu na venkově.

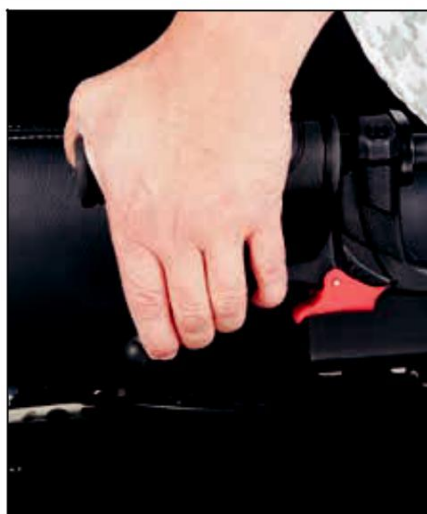

Mini Crosser M-joy lze také vybavit parkovací brzdou.



Mini Crosser M-joy lze vybavit řídítky, na které se může upevnit čelní sklo a přední košík.

Mini Crosser

Děti a mladí lidé

Náš oblíbený model pro děti a mladé lidi

Vhodný pro děti od 3 let.

Mini Crosser 3K má malý poloměr otáčení a dobrou manévrovatelnost.

Extrémně silný a spolehlivý Mini Crosser.

Vysoká stabilita díky vysoké váze.

Velké kola pro bezpečnou jízdu.

Mini Crosser je speciálně navržen pro skandinávské klimatické a terénní podmínky.

Dostupný v široké škále speciálních barev.

Je dostupný také široký výběr sedadel.

Možnost rodičovského klíče pro omezení rychlosti na polovinu. Pro vaši bezpečnost je možné Mini Crosser

vybavit omezením rychlosti při zatáčení.



Váš osobní Mini Crosser



Mini Crosser, který roste

Navržen pro děti – vozidlo, které “roste”. S nastavitelným dětským sedadlem, řídicím sloupkem, který lze snížit, nastavitelným stupátkem a rukojetí akcelérátoru s malým průměrem.



Dostupná kabina

4-kolový model pro děti a juniory je také dostupný jako 4-kolová kabina.

Mini Crosser

Cabin



4-kolové M modely – také verze MaxX a MJ- jsou dostupné s kabinou. S kabinou zůstanete v teple a suchu po celý rok.

Ochrání vás před vlivy počasí. Můžete mít také kabinu s vyhříváním, takže i v zimě můžete vyrazit na výlet. Standardní vybavení kabiny je elektrický stírač a ostříkovač předního skla. Okna v bočních dveřích lze otevřít a vpustit tak čerstvý vzduch, dveře se dají zamykat. Kabina je obzvláště vhodná pro lidi se zhoršenou funkcí plic a respiračními problémy. Mini Crosser Cabin nabízí dostatek prostoru a má nízkou hlučnost

Výhled z kabiny je dobrý díky velkým oknům, ale kabinu lze vybavit i zadní kamerou (příslušenství) pro lepší přehled při couvání. V létě se dají dveře demontovat a uskladnit. Velké přední a zadní okna jsou z bezpečnostního skla odolného proti poškrábání.

Technické údaje

Celková délka:	161 cm
Celková délka vč. stabilizačních koleček:	169.5 cm
Celková šířka:	73 cm

Dojezdová vzdálenost až 60 km s bateriemi 94 Ah.

(Maximální dojezdová vzdálenost s novými bateriemi při +20° na rovném, pevném povrchu)



Mini Crosser

Cabin



Mini Crosser s kabinou je prostorný a tichý, a velká okna nabízí skvělý výhled. Velké dveře umožňují snadné nasedání a vystupování z kabiny.



Klika u dveří je velká pro snadnější otevírání dveří. Dveře se dají zamknout.



Okna jsou z tvrzeného skla odolného poškrábání, zaručují dobrou viditelnost a vydrží



Mini Crosser Cabin má širokou řadu příslušenství, vč. přívěsu.

Mini Crosser

Příslušenství



Zrcátko pro Mini Crosser standard
Vpravo - SR-05206
Vlevo - SR-05207
Zrcátko pro Mini Crosser Joy
Vpravo - E-130-06-100
Vlevo - E-130-06-101



Nástavec zrcátka 10 cm
Vlevo / Vpravo - T-127-06-187




Zrcátko pro Cabin
Vlevo - T-127-06-323
Vpravo - T-127-06-324
Zadní zrcátko - T-127-06-814



Košík na řídítka - M-127-06-163



Košík pro Mini Crosser Joy
M-127-06-560

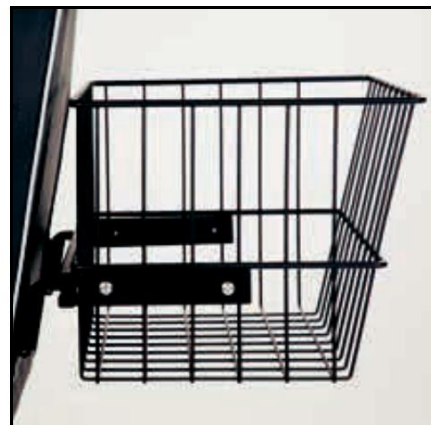

Zadní košík pro Mini Crosser
ERGO2 Sedadlo - M-127-06-165
EBLO & Ergo Sedadlo - M-127-06-165
Cabin - M-127-06-164
Zadní adaptér pro kabinu
Adaptér k příslušenství pro kabinu II -T-127-
6-952



Komplet batoh na ruční opěrku - Ergo2
M-127-07-284



Držák na láhev, Ergo2
CR-00636



X-grip držák na mobilní telefon, Ergo2
CR-03127

Mini Crosser


Příslušenství



Zadní box se zamykáním, připraveno k instalaci. M-127-06-260



Držák láhve s kyslíkem.
Instalováno na c-liště.
T-127-06-124

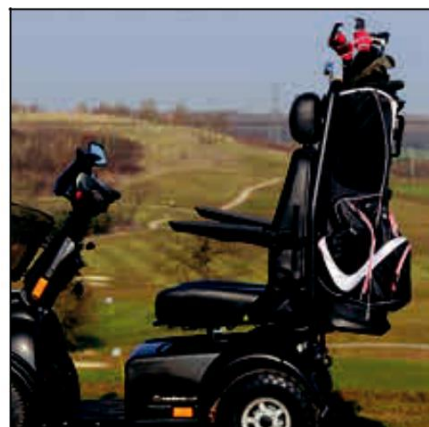

Držák na golfové hole.
T-127-06-123




Držák na pár holí / berlí. M-127-06-002.
Adaptér pro držák na hole / berle.
Připevněný na zadní košík. T-127-06-573.



Signální vlajka připevněna na košík,
zadní. Košík není součástí. S5-0002
Signální vlajka připevněna na c-liště. S5-
0004



Čelní sklo pro Mini Crosser
T-127-06-165

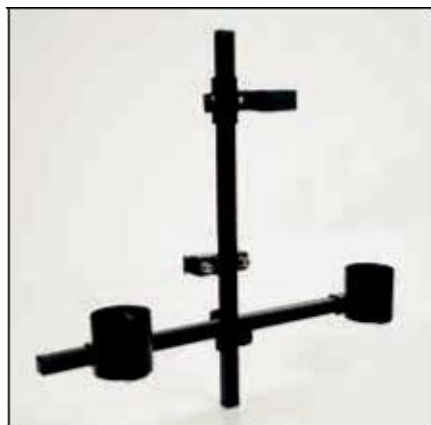

Držák na hole/berle pro pomůcky se čtyřmi
nohami. T-127-06-151



Komplet. Nastavitelná rukojeť s čelním sklem
pro M-joy. M-127-6-084

Mini Crosser

Příslušenství



Nosič chodítek, max. váha 20kg (44lb). T-127-06-122.

Nosič chodítek Rollator, max. váha 20 kg (44lb). T-127-06-139.

Nosič chodítek Rollator pro Troja. T-127-06-585. Nosič chodítek, elektrický.

T-127-06-219.



Držák na manuální vozík, zadní, max. váha 20 kg (44lb). T-127-06-131.

Tažná tyč pro manuální vozík. T-127-06-156.

Manuální skládací vozík. T-127-06-335. Držák s deskou, připevněný vzadu na c-liště.



Kulatá hlavice pro přívěs. T-127-06-183



Černý přívěs se zámkem a tažní tyčí. T-127-06-159.

Černý přívěs se zámkem, tažní tyčí a světlem pro Mini Crosser Model M1. M-127-06-089.

Černý přívěs se zámkem, tažní tyčí a světlem pro Mini Crosser Model M2. M-127-06-189.



Dělní přívěs pro děti, s kulatou hlavici pro tažení. Max. váha 45kg (99lb).

T-127-06-106



Měřič rychlosti pro Mini Crosser M1. M-127-06-147



Rukojeť pro říditka, prodloužená 40 mm. M-127-03-027



Levý a pravý akcelérátor, s přepínačem. M-127-06-171

Mini Crosser

Příslušenství



Otočná rukojeť akcelérátoru, pravá.
T-127-06-153.

Otočná rukojeť akcelérátoru, levá.
T-127-06-154



Nožní pedál plynu - wigwag.
T-127-06-574



Krycí plachta odolná povětrnostním podmínkám.
T-127-06-135XL




Termální voděodolná pokrývka. T-127-06-129.
Voděodolná pokrývka sedadla, dospělý. T-127-07-042. Voděodolná pokrývka sedadla, dítě. T-127-07-043.



Pršiplášť pro děti. T-127-06-136.
Pršiplášť pro dospělé. T-127-06-137



Vyvýšené stupátko, 3- a 4-
kolový model M-127-06-117

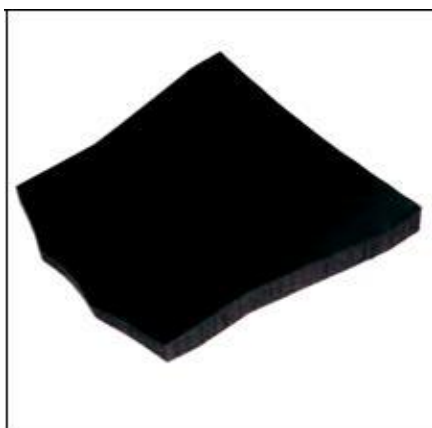

Vyvýšená podložka pod nohy, 5 cm malá 3K
M-127-6-907
Vyvýšená podložka pod nohy, 5 cm velká 3K
M-127-6-906



Vyvýšená podložka pod nohy, 5 cm malá 4K
M-127-6-909
Vyvýšená podložka pod nohy, 5 cm velká 4K
M-127-6-908



Prodloužená podložka pod nohy pro 3K skútr
pravá strana M-127-06-119
Prodloužená podložka pod nohy pro 3K skútr
Levá strana M-127-06-120

Mini Crosser

Příslušenství



Podpora pro nohy pro 3K, Levá / pravá strana T-127-06-108
Podpora pro nohy pro 4K, Levá / pravá strana M-127-06-961



Amputační podpora, Levá / pravá pro Ergo sedadlo T-127-06-106
Amputační podpora, Levá / pravá pro Ergo2 sedadlo M-127-07-162



Boční panel stupátek. T-127-06-125



Podpora stehna 100*300.
Nastavitelná vlevo nebo vpravo pro ERGO2 CR-03074



Kola, 13x5.00-6" Komplet. Černé, 6 pr. pro M-Model. M-127-3-165
Kola, 13x5.00-6" Komplet. Černé, 6 pr. Odolné proti proražení pro M-Model. M-127-3-168



Kola, 13x5.00-6" Komplet. Černé, 6 pr. S hroty pro M-model M-127-3-165p



Kola 13x3.00-8" Komplet. Černé, 6 pr. Pro M-Model. T-127-3-065
Kola, 13x3.00-8" Komplet. Černé, 6 pr. Odolné proti proražení pro M-Model T-127-3-068



Golfové kolo, 13x5.00-6" Komplet. Černé, 4 pr. pro M-Model. E-115-03-065



Kolo, komplet 6". Ø370 mm, 530/4,50-6", černé, 4 pr. pro M-Model. T-127-3-765. Tohle kolo lze použít u všech 4-kolových modelů Mini Crosseru, vpředu i vzadu. U 3-kolového modelu jej lze použít pouze vzadu. Upozorňujeme, že poloměr otáčení se zvýší při použití tohoto typu kola vpředu. M-127-06-150.

Mini Crosser

Příslušenství



Držák rezervního kola, instalace vzadu T-127-06-138



Velký přední nárazník, lze nainstalovat na všechny 4-kolové Mini Crossery M-127-3-535



Stabilizační kolečka, u některých modelů jsou standardní součástí výbavy M-127-06-104



Bezpečnostní tyč, lze nainstalovat na 3 i 4-kolové skútry Mini Crosser M-127-06-258



Nabíječka pro Mini Crosser J.K.MEDICO 10 Amp.
Nabíječka AGM T-127-05-025 J.K.MEDICO 10 Amp.
Nabíječka, GEL T-127-05-034



Mini Crosser používá dvě baterie - 24 voltů. Lze použít jiné baterie, od jiných dodavatelů v jiných zemích, více informací vám poskytne Váš místní prodejce nebo kontaktujte Mini Crosser.
Baterie 51 AH, (C5) 12 Volt, GEL, EXIDE SR-00892
Baterie 75 AH, (C5) 12 Volt, AGM, CPX SR-05902
Baterie 94 AH, (C5) 12 Volt, GEL, EXIDE SR-00370
Baterie se šroubovými svěrkami.
Baterie 51 AH, (C5) 12 Volt, GEL, EXIDE SR-05993
Baterie 71 AH, (C5) 12 Volt, GEL, HAZE HZY-EV12-80



Omezení rychlosti pomocí potenciometru M-127-06-135
Omezení rychlosti pomocí spínače T-127-06-121

Mini Crosser

FAQ



Mini Crosser

Pro všechny M-modely Mini Crosseru platí následující:

Normy

DS / EN 12184, 5. vydání 2014-05-09, které je nejnovější normou.

Vyznačujeme nezávisle následující ISO:

- ISO 7176-19: 2008 – Kolečková mobilní zařízení používaná jako sedadla v motorových vozidlech, např. Mini Crosser lze použít jako sedadlo v autě.
- ISO 10542-1: 2013-01-28 Předmět 2 Upínací a bezpečnostní pásový systém pro invalidní vozíky
- ISO7176-8: 2002 – Tato norma zní – Sedadlo musí splňovat váhovou kapacitu skútru. ERGO2 je testován podle této normy, tedy pokud je Mini Crosser je stavěn pro váhu uživatele 175 kg, pak sedadlo a ruční opěrky musí zvládnout tuto zátěž – každá ruční opěrka zvlášť musí unést tlak 95 kg při 15-stupňovém úhlu, 5 cm od konce ruční opěrky, bez poškození.
- DIN EN 1122 Bio kompatibilita – Testování sedadel a ručních opěrek.

Technické specifikace

Váha uživatele

Standardní Mini Crosser je stavěn na váhu 175 kg. HD Verze 250 kg, sedadlo je také vyrobené pro tento účel. Odstraněním CE značky a použitím speciální úpravy může být nosnost Mini Crosseru upravena až na 300 kg.

Převodovka

Jsou tři různé převodovky, každá s vlastními výhodami/nevýhodami:

- 10 km, lze použít v kopcovitém terénu/v horách, dostatečně silná
- 15 km, nejlépe používat na rovném povrchu, ale lze také využívat na venkově.
- 13 km, kombinace, má menší tah než 10 km verze, ale je silnější než 15 km.

U všech převodovek jsou nainstalované termální čidla, aby se předešlo přehřátí převodovky.

Při 140 stupních Celsia je rychlost snížena na 60%

Při 150 stupních Celsia se Mini Crosser zastaví.

Rám / podvozek

Aby se předešlo korozi, všechny Mini Crossery byly ošetřené

- Zinkový nátěr
- Práškový nástřik

Rám je připraven pro všechno příslušenství, odpadá tedy potřeba vrtání nových děr do rámu.

Velikost baterií

Až 94 Ah baterie, ať už je to 3- nebo 4-kolový skútr.

Ruční brzda

Funkce brzdy je nainstalovaná na zadním levém kole. Důvod je ten, že jsme chtěli získat maximální možnost brzdění tam, kde je váha Mini Crosseru nejvyšší. Ruční brzda se snadno ovládá jednou rukou.

Tlumiče

Zadní:

Všechny Mini Crossery série M mají stejný systém tlumičů v zadní části. Jsou nainstalovány dvě pružiny.

Pro Mini Crosser existují dva typy pružin.

- Černé, ty se používají u všech Mini Crosserů s váhou uživatele do 175 kg.
 - Červené, ty se používají pro HD, Cabin a Maxx modely s váhou uživatele do 250 kg.
- Nicméně je možné později provést výměnu černých pružin za červené, pokud je to zapotřebí.

Předek:

U čtyř kolového modelu používáme Rosta T-blok. Používá se kvůli neustálému maximálnímu kontaktu předních kol se zemí. Nicméně reagují částečně nezávisle na sobě, takže vozítko je v rovině, když přejíždí přes překážky, a vše je bezúdržbové.

U tří kolového modelu se používá olejem mazaná vidlice.

Progresivní tlumiče a závěsný systém poskytují hladkou jízdu.

Sedadla

ERGO2 sedadla jsou multi-nastavitelná u všech funkcí.

- Výška sedadla.
- Posun vpřed / vzad
- Otáčení sedadla
- Úhel zádové opěrky

Nabízíme také elektrické řešení všech těchto funkcí

Ruční opěrku lze nastavit

- Úhel
- Výška
- Šířka

Ovladač


P/G S-200.

Jiné

Elektrické vedení a konektory použité ve skútrech Mini Crosser byly navrženy pro dané podmínky. Používáme originální konektory MOLEX.

Údržba Vašeho skútru Mini Crosser

Přečtěte si prosím, pozorně Váš uživatelský manuál, a pokud máte jakékoli otázky, obraťte se na Vašeho místního prodejce nebo kontaktujte Mini Crosser. Snažíme se vyškolit všechny naše prodejce poskytující služby, a všichni certifikovaní prodejci mají toto označení:

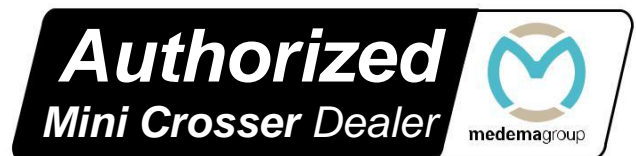

Informace

Pro více informací o skútrech Mini Crosser navštivte medema.com. Pokud máte jakékoli otázky, napište prosím e-mail na info@minicrosser.com

Pravidla a podmínky prodeje a dodání

Kontaktujte prosím Vašeho nejbližšího prodejce, nebo kontaktujte přímo Mini Crosser přes info@minicrosser.com

Výjimky

Mohou nastat chyby v tisku. Rozsah a technické specifikace se mohou změnit. Specifikace výrobků a vybavení se může lišit v závislosti na tom, ve které krajině se nacházíte.

MINI CROSSER - Originál



MINI CROSSER - Originál
Made in Denmark

Medema A/S
Enggaardvej 7
DK-7400 Herning
Denmark
Tlf. +45 70 10 17 55
www.medema.com or www.minicrosser.com
e-mail info@minicrosser.com